




Acro 2019-nCoV IgG/IgM rychlý test

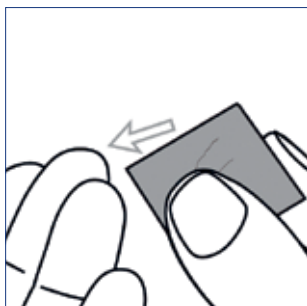


1 Vzorek odeberte z boční strany prostředníčku nebo prsteníčku. K očištění konce prstu použijte čtverečky s alkoholem.

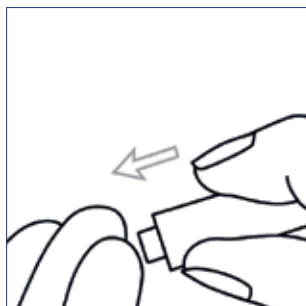


2 Lancetu přiložte jemně k prstu a propíchněte kůži. První kapku krve vytlačte a setřete ji.

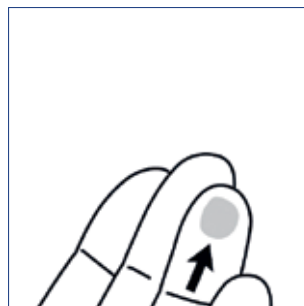


3 Pro zvýšení toku krve prst jemně masírujte, ale ne neustále.

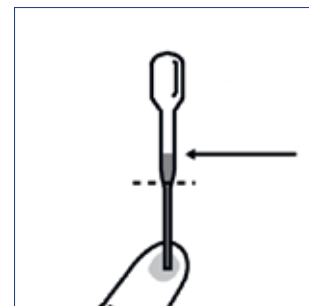


4 Kapátko držte kolmo a nasajte krev asi 1 cm nad zúženou část.

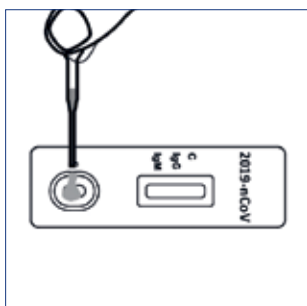

5 Kazetu vyndejte z plastového sáčku a umístěte ji na čistý a rovný povrch. Přidejte 1 plnou kapku krve (přibližně 20 μ l) do otvoru pro vzorek (S).

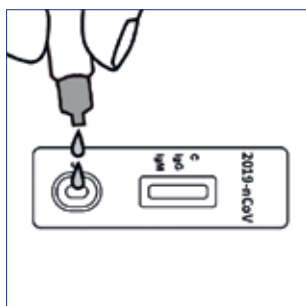


6 Přidejte 2 kapky pufru (přibližně 80 μ l) a zapněte časovač.

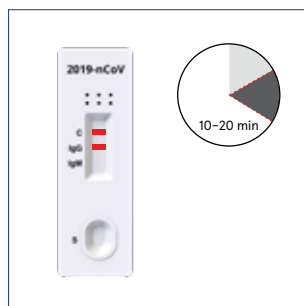

7 Po 10 minutách přečtěte výsledek. Po 20 minutě již výsledek neinterpretujte.


Před provedením testu si prosím přečtěte návod k použití.

Acro 2019-nCoV IgG/IgM rychlý test

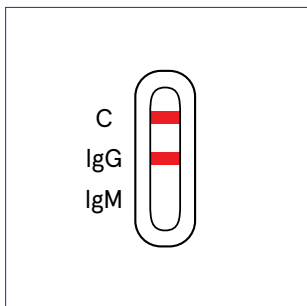


IgG pozitivní výsledek

Objeví se dva barevné proužky. Jeden barevný proužek se objeví v kontrolní zóně (C) a další proužek v IgG zóně.

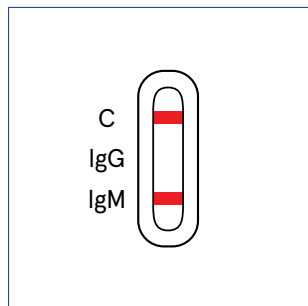


IgM pozitivní výsledek

Objeví se dva barevné proužky. Jeden barevný proužek se objeví v kontrolní zóně (C) a další proužek v IgM zóně.

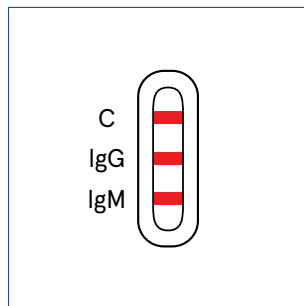


IgG a IgM pozitivní výsledek

Objeví se tři barevné proužky. Jeden barevný proužek se objeví v kontrolní zóně (C), jeden proužek v IgG zóně a jeden proužek v IgM zóně.

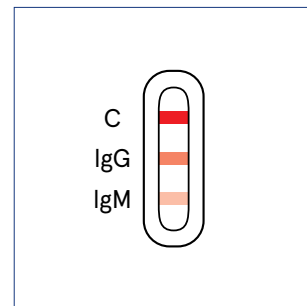


POZNÁMKA: V závislosti na koncentraci protilátek proti 2019-nCoV, které jsou ve vzorku přítomny, se intenzita barvy výsledkového proužku různí. Jakýkoli odstín barvy testu je nutno hodnotit jako pozitivní výsledek.

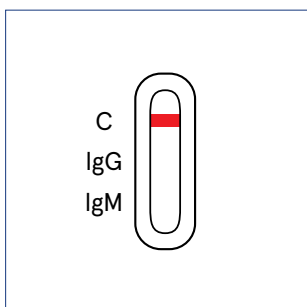

Negativní výsledek

Jeden barevný proužek se objeví v kontrolní zóně (C) a žádný se neobjeví v zóně IgG nebo IgM.

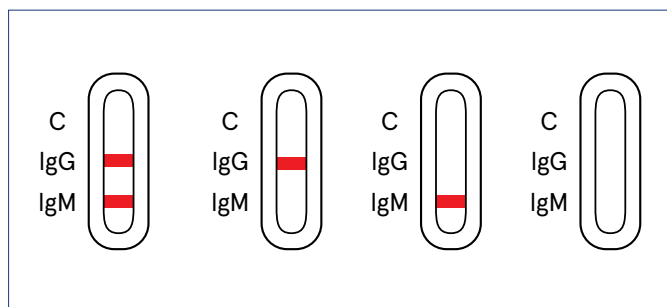

Neplatný výsledek

V kontrolní zóně (C) se neobjeví žádný proužek. Zkontrolujte pracovní postup a vyšetření opakujte s novým testem. Pokud by se problém objevil znovu, přestaňte kit používat a kontaktujte zástupce firmy Aidian.

Pro profesionální použití *in vitro*.

Kontaktní informace

Aidian Oy, Finsko
Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

E-mail: info@aidian.cz

www.aidian.cz

Produkt

Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 tests

Číslo produktu

INCP-402

Objednací číslo

154601