




QuikRead go[®] CRP a CRP+Hb

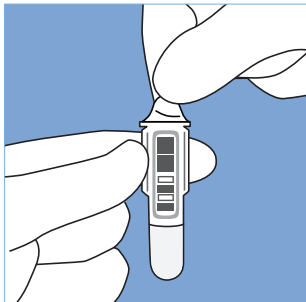


1 Odstraňte z kyvety krycí fólii. Nedotýkejte se rovných čistých ploch ve spodní části kyvety.

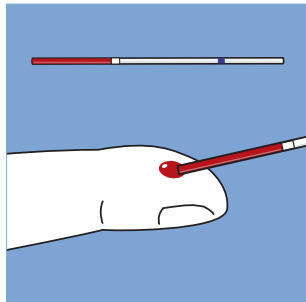

2 Odeberte pacientovi vzorek krve až po bílou záražku (20 µl). Ujistěte se, že v kapiláře nejsou vzduchové bubliny. Zbytky vzorku z vnějšího povrchu kapiláry otřete.

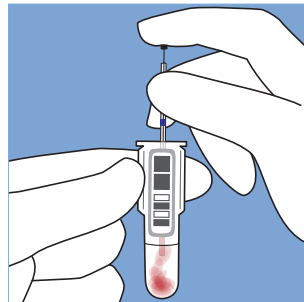


3 Vložte kapiláru se vzorkem krve (20 µl) do kyvety s puřrem a stlaĉte píst. Přesvědĉte se, že kapilára je zcela prázdná.

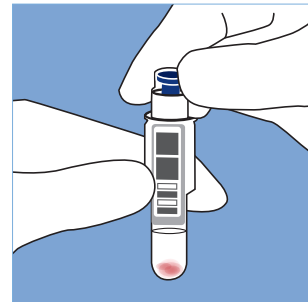

4 Kyvetu pevně uzavřete víčkem s reagentii pro CRP. Netlaĉte na vnitřní modrou část víčka. Test proveďte do 2 hodin.



5 Na displeji přístroje QuikRead go zvolte tlačítko **Měření**.

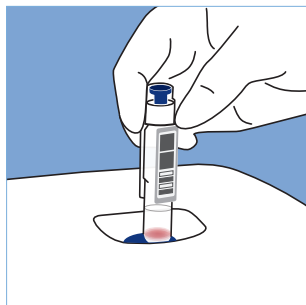

6 Vložte kyvetu do měřicí komůrky přístroje čárovým kódem směrem k sobě.



7 Výsledky se na obrazovce objeví po dokončení měření, kyveta se automaticky vysune z měřicí polohy. U testu QuikRead go CRP+Hb se výsledek Hb zobrazuje pod výsledkem CRP.

Před provedením testu si prosím přečtete podrobnější informace v návodu k použití.

QuikRead go[®] CRP a CRP+Hb



Souprava

Neotevřená souprava při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#) soupravy



Tuba obsahující
víčka s reagensy

Skladování při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#) soupravy
Skladování při teplotě 18–25°C: **1 měsíc** (7,5 hodiny denně – 3 měsíce)



Kyvety

Neotevřená vnější ochranná fólie při teplotě 2–25°C:
do [data expirace](#) soupravy
Neotevřené kyvety po otevření vnější ochranné fólie:
při teplotě 2–8°C: **6 měsíců** / při teplotě 18–25°C: **3 měsíce**



Otevřená
kyveta

Před testováním kyvetu vytemperujte na teplotu 18–25°C
Test je nutné provést do **2 hodin** od otevření kyvetu
Vzorek je v pufru stabilní po dobu **2 hodin**



Kontrolní
materiály CRP

Neotevřená lahvička při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#)
Otevřená lahvička při teplotě 2–8°C: **2 měsíce**



Kontrolní
materiál Hb

Neotevřená lahvička při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#)
Otevřená lahvička při teplotě 2–8°C: **1 měsíc**

Kontaktní informace

Aidian Oy, Finsko
Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel.: +420 233 350 533

www.aidian.cz / www.quikread.cz
www.tackleamr.com / www.testcrp.cz

Produkt	Kat. č.
QuikRead go CRP včetně kapilár a pístů	135171
QuikRead go CRP+Hb včetně kapilár a pístů	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead Capillaries 20 µl	67962
QuikRead Plungers	67966
Přístroj QuikRead go	135867